


Video-Laryngoskop BD-MK von Profis für Profis entwickelt



Mehr Sicherheit für Ihre Patienten

Das Video-Laryngoskop von HERZmed mit Einwegspatel

Das HERZmed Video-Laryngoskop BD-MK wurde konzipiert, um eine optimale Sicht auf die Stimmbänder und Glottis auch bei schwierigen anatomischen Verhältnissen zu gewährleisten. Die Kombination aus dem spiefelfreiem Farbdisplay (dreh- und schwenkbar) und einer HD-Kamera mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixeln ermöglicht eine präzise und sichere Intubation. Zusätzlich sorgt das mittig positionierte Display für eine einfache Anwendung für Links- und Rechtshänder.

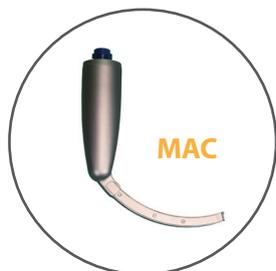

HERZmed Video-Laryngoskop-SET MAC für Kinder & Erwachsene

Lieferumfang (SET 311.9004):

- HERZmed Video-Laryngoskop BD-MK mit LCD Display
- HERZmed Griffstück Ausführung Macintosh
- Macintosh Spatelset:
 - MAC 1 Einwegspatel BD-MK
 - MAC 3 Einwegspatel BD-MK
 - MAC 4 Einwegspatel BD-MK
- Aluminium Koffer für Aufbewahrung & Transport
- Stromadapter mit EU-Stecker



HERZmed Video-Laryngoskop-SET MIL für Kleinkinder

Lieferumfang (SET 311.9014):

- HERZmed Video-Laryngoskop BD-MK mit LCD Display
- HERZmed Griffstück Ausführung Miller
- Miller Spatel:
 - 2 x MIL 0 Einwegspatel BD-MK
- Aluminium Koffer für Aufbewahrung & Transport
- Stromadapter mit EU-Stecker

Vorteile

Patientensicherheit

Bei der Intubation von Notfallpatienten mit vermutetem Trauma der Halswirbelsäule (HWS) muss im Vergleich zur direkten Laryngoskopie nur eine geringere Reklination erfolgen.

Ergonomisch

Durch das ergonomische Design ist das BD-MK für Links- und Rechtshänder geeignet.

Optimale Sicht

auf die Stimmbänder und Glottis bei schwierigen anatomischen Verhältnissen.

Kamerafunktion

Einfache Aufnahmefunktion (Foto, Video) der erfolgreichen Intubation zu Schulungs- und Dokumentationszwecken

Anwenderschutz nach S3-Leitlinie

Bei COVID-Patienten kann durch die indirekte Intubation mehr Abstand zwischen Patient und Anwender geschaffen werden.



INNOVATIV. SICHER. ZUVERLÄSSIG.

USB Anschluss

zum Laden und Übertragen von Video- und Bildmaterial (jpg, avi) auf den Computer

Akku im Displaygehäuse

kein Batteriefach notwendig

Für Links- und Rechtshänder

Übersichtliche, zentrale Anordnung des Bildschirms

Ergonomisch

geformter Handgriff für sicheren Halt

Akkulaufzeit

sehr lange Akkulaufzeit von mehr als 2 Stunden

Griffstück

lässt sich mittels Sicherheits-Drehverschluss schnell und unkompliziert bei Bedarf wechseln



LCD Display

Dreh- und klappbares, zentral angeordnetes, spiegelfreies Farbdisplay (3 Zoll) ermöglicht eine präzise und sichere Intubation

Video- und Fotoaufnahmen

mit der Aufzeichnung von Datum und Uhrzeit für eine sichere Dokumentation



Aluminiumgehäuse

mit natürlicher Haptik und ergonomischen Design konzipiert für den perfekten Einsatz

LED Beleuchtung

sehr helle, tageslichtweiße Leuchtdiode direkt an der Videolinse, für die perfekte Ausleuchtung

Spatel

mit sicherem Halt durch Clip-Funktion

HD Kamera

mit hervorragender Auflösung von 1280 x 720 px



Einweisungspflichtiges Medizinprodukt!

Wir bieten Ihnen auch gerne eine unkomplizierte Einweisung per Video-Chat an.

Technische Daten

Bildschirm

Größe: 3 Zoll

Typ: LCD (Liquid Crystal Display)

Kamera

Auflösung: 1280 x 720 px

Format: 4:3

Speicher

Typ: microSD

Speicherkapazität: 8 GB

Akku

Typ: 3.7 V Lithium-Ionen-Akku

Akkulaufzeit: 140 Minuten

Ladedauer: 5 Stunden

Netzteil

Input: 100 -240 V, 50/60 Hz, 0.3 A

Output: 5 V DC, 1 A

Material Gehäuse

Bildschirmgehäuse: ABS

Griff: Aluminium

Material Spatel

Einweg-Spatel: Polycarbonat mit Antibeschlag-Beschichtung

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich: -20° C bis 40° C (Lagerung,Transport)

Temperaturbereich: 10° C bis 40° C (Betrieb)

Relative Luftfeuchtigkeit: 10 % rF - 90 % rF, nicht kondensierend

Luftdruck: 500 hPa - 1060 hPa

Bestellinformationen



Bestellung | Anfrage | Vertrieb

Bitte wenden Sie sich an unseren Fachhandelspartner:

Set Artikel

Art.-Nr.	Beschreibung
311.9004	HERZmed Video-Laryngoskop BD-MK SET MAC Kinder & Erw.
311.9014	HERZmed Video-Laryngoskop BD-MK SET MIL Kleinkinder

Einzelteile

Art.-Nr.	Beschreibung	
311.9006	HERZmed Video-Laryngoskop BD-MK LCD-Display	①
311.9007	HERZmed Video-Laryngoskop BD-MK Griff, Macintosh	②
311.9008	HERZmed Video-Laryngoskop BD-MK Griff, Miller	③

Spatel

Art.-Nr.	Beschreibung	
311.9009	HERZmed MAC 1 Einwegspatel, VPE = 10 Stück	④
311.9010	HERZmed MAC 3 Einwegspatel, VPE = 10 Stück	⑤
311.9011	HERZmed MAC 4 Einwegspatel, VPE = 10 Stück	⑥
311.9012	HERZmed MIL 0 Einwegspatel, VPE = 10 Stück	⑦

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	
311.9005	HERZmed Video-Laryngoskop Aluminiumkoffer	⑧
N180060	HERZmed Video-Laryngoskop Aufbewahrungstasche	⑨
311.9013	Stromadapter EU	⑩

HERZmed
Alles auf einen Schlag!



Unser Video-Laryngoskop wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Hersteller Besdata Technology Co. Ltd China entwickelt und produziert. Die Synergie aus Know How und Produktionsstärke bringt uns gemeinsam in die Lage, Ihnen ein hochwertiges Medizinprodukt zu einem attraktiven Preis anzubieten.

Generalvertrieb Europa: HERZmed GmbH Oberammergau
Hersteller: Besdata Technology Co. Ltd Shenzhen China
 Alle weiteren Infos zum Produkt finden Sie unter: www.herzmed.de

Die dargestellten Produkte sind nur ein Auszug unseres Produktsortimentes. Genaue Details und Produktinformationen erhalten Sie auf Anfrage oder unter www.herzmed.de. Alle verwendeten Markennamen bleiben Eigentum des jeweiligen Markeninhabers. Für Irrtümer, mögliche Druckfehler und Farbabweichungen übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie ebenfalls unter www.herzmed.de einsehen können.